


3 Настройка регистратора выбытия

Регистратор выбытия предназначен для отправки в национальную систему маркировки и прослеживания товаров (ИС МДЛП) информации о выводе лекарственных препаратов из оборота при отпуске лекарств по льготным рецептам со 100% льготой и при отпуске в медицинских организациях. Может использоваться для проверки информации по упаковкам лекарственных препаратов.

Не предназначен для отправки сведений о других операциях (приёмке товара, внутреннего перемещения, списания, продажи).


Журнал содержит настройки для работы регистратора выбытия через программу «Талисман–SQL». Располагается в меню «Учёт маркированных ЛП». Окно журнала имеет вид (рис. 3-1).

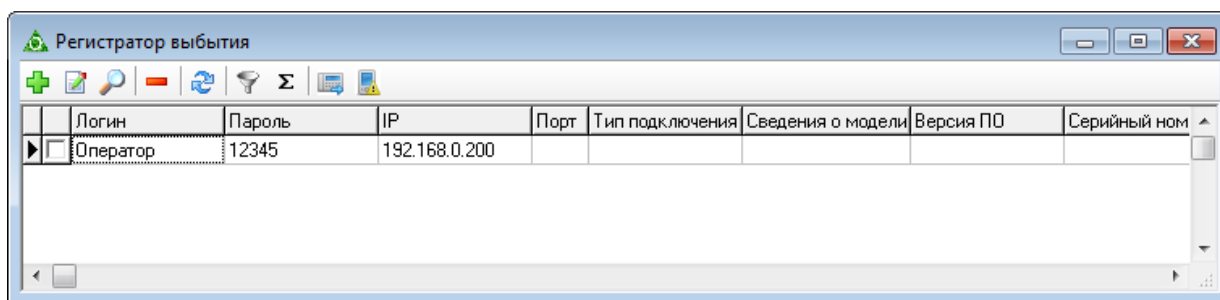


	Логин	Пароль	IP	Порт	Тип подключения	Сведения о модели	Версия ПО	Серийный ном
<input type="checkbox"/>	Оператор	12345	192.168.0.200					

рис. 3-1

Чтобы подключить регистратор, выполните следующие действия.

1. Обеспечьте доступ регистратора по сети WI-FI или Интернет (смотрите документацию к регистратору).
2. Нажмите кнопку  – «Добавить», появится форма ввода данных (рис. 3-2).

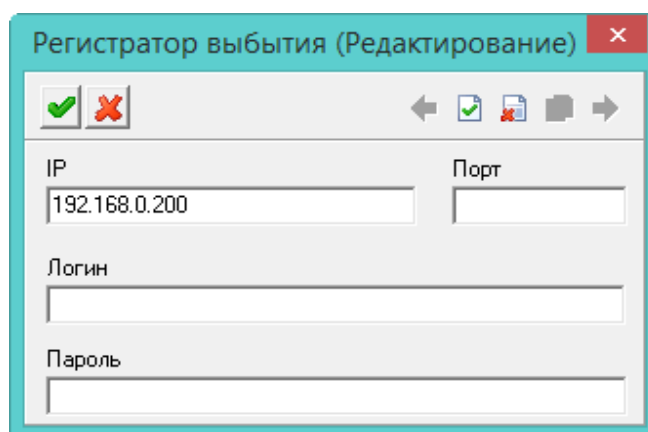

Регистратор выбытия (Редактирование)

← →

IP: 192.168.0.200 Порт:

Логин:

Пароль:

рис. 3-2

3. Внесите данные (смотрите документацию к регистратору).




IP – укажите статический внешний IP-адрес.

Порт – укажите порт (берётся из документации к регистратору).

Логин – введите пользователя (берётся из документации к регистратору).

Пароль – введите пароль (берётся из документации к регистратору).

Производитель «Атол»	Производитель «Штрих-М»
Порт 8443; Логин: user1; Пароль: Pas\$w0rd	Порт 8080; Логин: operator; Пароль: 123456
Логин: user2; Пароль: qwE123xx	Логин: administrator; Пароль: 654321

4. Нажмите кнопку  – «Подтвердить изменения», чтобы сохранить.
5. Нажмите кнопку  – «Получить информацию о регистраторе выбытия», чтобы загрузить информацию о регистраторе в программу. Сведения о регистраторе будут скопированы.
6. Чтобы проверить состояние регистратора (активен/не активен), воспользуйтесь кнопкой  – «Получить состояние РВ».